

Hörnews März

So kurz vor den Feiertagen haben wir noch schnell etwas Lesestoff für Sie. Daher verzichten wir heute auch auf viele einleitende Worte und sagen nur: viel Spaß beim Lesen unserer Hörnews März.


Doch eins wollen wir uns natürlich nicht nehmen lassen:

Wir wünschen Ihnen frohe Ostern!

Ihr Starkey-Team

Ostergrüße für Ihren Social Media Feed

Die Osterzeit steht vor der Tür. Sie möchten Ihren Kundinnen und Kunden auch über Ihre Social-Media-Kanäle frohe Ostergrüße zukommen lassen? Dann laden Sie sich die Vorlagen für Facebook und Instagram direkt kostenlos herunter.

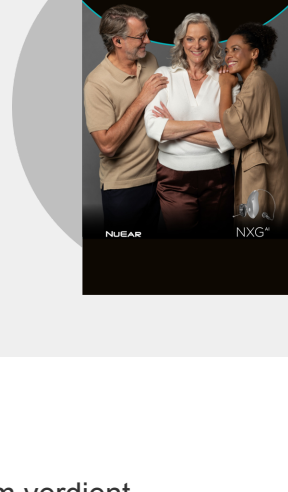

[Zum Download](#)

Einfach Klasse. In jeder Klasse.

Wir finden, jeder Ihrer Kunden hat ein Starkey-Hörsystem verdient.

Deshalb bieten wir innovative Lösungen in allen Klassen.



Schon gewusst?

Davon profitieren Sie und Ihre Kunden IMMER bei Starkey:

Kostenloser Hörertausch* innerhalb der gesamten Garantiezeit jedes Hörsystems.

Kompromisslos guter Klang und bis zu 51 Stunden Akku-Laufzeit ab der Comfort-Klasse.

Ladestation kostenlos zu jedem Akku-System der Economy -und Entry-Klasse.

Verlustabsicherung für alle gekauften Hörsysteme innerhalb der ersten 3 Jahre.

Das gilt selbstverständlich auch für alle Geräte der Marke

NUEAR

Neue Option „individuelle Funktionen“ im eStore

Seit einiger Zeit sehen Sie bei Bestellungen von Im-Ohr-Systemen in unserem eStore die Option „individuelle Funktionen“. Mit dieser Option wählt unser System selbstständig aus vorhandenen Erfahrungswerten die geeignete Verstärkung für das zu bestellende Hörsystem aus. Dies kann im Einzelfall von Ihren Vorstellungen abweichen und hat daher in der Vergangenheit bereits zu Rückfragen geführt.

Unsere Empfehlung: Bitte beachten Sie, dass Ihnen vor Ort weitaus mehr Informationen zur Bewertung und Wahl der notwendigen Verstärkungsmatrix und Belüftung vorliegen, als unserem System. Daher empfehlen wir, bei der Fertigungshilfestellung "nein" auszuwählen.

Individuelle Optionen

Fertigungs-Hilfestellungen

Wählt die optimale Kombination aus Hörer und Belüftungsöffnung auf der Grundlage von Hörverlust, Anamnese sowie Größe und Form des Ohrs.

Möchten Sie, dass wir die besten Optionen für Sie auswählen? Ja Nein

Sollten Sie generelle Fragen zu Bestellungen von Im-Ohr-Hörsystemen haben, wenden Sie sich gerne an unsere Spezialisten unter manufaktur@starkey.de. Gerne können Sie auch unter training.starkeypro.de eine persönliche Online-Schulung zu unseren individuellen Hörsystemen buchen. Unser Trainerteam freut sich auf Sie!

Das gewisse Extra: Edge Modus+ - jetzt dynamisch

Seit unserem Firmware-Update Ende Februar passt sich unser beliebter Edge Modus+ jetzt sogar dynamisch an, wenn sich die Hörumgebungen von Hörsystemtragenden verändert. Generell gilt: Zu jedem Zeitpunkt erhalten Nutzerinnen und Nutzer von Genesis AI Hörsystemen über die Situationsautomatik eine optimale Anpassung an die aktuelle Umgebung. Darüber hinaus erhalten sie mit dem Edge Modus+ DAS PLUS an mehr Individualität für ihre persönlichen Hörbedürfnisse.

[Mehr erfahren](#)

Tipps zur Anpassung von Genesis AI Demo-Geräten in Verbindung mit der ProFit Version 2024.0.10100.0

Um unterschiedliche Technologiestufen für Ihre Kunden optimal erleb- und vergleichbar zu machen, bietet sich die Verwendung von Demo-Geräten an. So ist es möglich, zwischen den unterschiedlichen Techlevels der Genesis AI Familie mit nur wenigen Klicks zu wechseln und das mit nur einem Gerät. Um einen sicheren Wechsel von einer zur anderen Technologiestufe durchzuführen, ist es notwendig, die Geräte vorab in die **Werkseinstellung** zurückzusetzen. Nachdem der Technikwechsel im Gerät vorgenommen und ein BestFit durchgeführt wurde, kann die vorherige Einstellung des Kunden wieder eingespielt werden. Wir bitten Sie, diesen Ablauf ist bis zum nächsten Softwareupdate zu beachten.



Mini Turbo Charger

Wir stellen den Verkauf unseres Mini Turbo Chargers ein. Als Alternative empfehlen wir Ihnen unseren Premium Standard Charger (Artikelnummer: 43014-000). Mit der Premium-Ladestation können die Hörsysteme auch unterwegs bequem über die integrierte Powerbank aufgeladen werden.

Hear better. Live better.

Leiten Sie die Hörnews gerne weiter

Haben Sie diese Ausgabe weitergeleitet bekommen und möchten zukünftig auch die monatlichen Starkey Hörnews erhalten? Dann melden Sie sich einfach unter der Angabe „Hörnews abonnieren“ mit Ihrem Namen und Ihrer Firmierung per E-Mail an: marketing@starkey.de

Sie möchten uns Feedback zur aktuellen Ausgabe geben oder haben Anregungen? Wir freuen uns auf Ihre E-Mail an marketing@starkey.de.

Gender Disclaimer

Aus Gründen der Lesbarkeit wird in diesem Newsletter darauf verzichtet, durchgehend geschlechtsspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer, Frauen und Diverse in gleicher Weise. Dies soll jedoch keinesfalls eine Geschlechterdiskriminierung oder eine Verletzung des Gleichheitsgrundsatzes zum Ausdruck bringen. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung.



[Diese E-Mail im Browser anzeigen](#)

Copyright © 2023 Starkey. Alle Rechte vorbehalten.

Starkey Laboratories (Germany) GmbH
Weg beim Jäger 218-222
22335 Hamburg
Tel. +49 40 / 42 94 73 - 0
Fax +49 40 / 42 94 73 - 255
Geschäftsführer: Markus Böcker

HINWEIS: Diese E-Mail enthält vertraulich und/oder rechtlich geschützte Informationen. Wenn Sie nicht der richtige Adressat sind oder diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, informieren Sie bitte sofort den Absender und vernichten Sie diese E-Mail.

[Adresse aus diesem Verteiler entfernen](#)